



# Komfortní zdroj tepla pro vaše svaly

## Infračervené lampy pro lidské použití

Infračervené žárovky Philips pro péči o zdraví a tělo jsou vytvořeny tak, aby léčily hluboko uložené svalové neduhy a zranění způsobená při sportu. Tyto reflektorové žárovky jsou excelentním řešením pro lokalizované tepelné ošetřování a uvolnění svalových bolestí. Lze je použít rovněž k léčbě revmatických obtíží. Tato forma tepelné terapie navíc urychluje vyléčení různých zranění, jako jsou zranění způsobená při sportu a neinfekční povrchová zranění, a v mnoha případech poskytuje rychlou a účinnou úlevu od bolesti. Výhodou této formy tepelné terapie je lokální povzbuzení krevního oběhu v pokožce vlivem rozšíření cév. Výsledkem je zvýšení transportu metabolitů a dalších základních biochemických látek. Výhodou je rovněž hlubší pronikání tepla, které vede k jemnému a příjemnému hřejivému pocitu.

### Výhody

- Optimální pronikání do pokožky a svalů pro maximální úlevu od svalových bolestí
- 90 % energie vyzařeno ve formě infračervených tepelných paprsků
- Okamžitý, přesně ovladatelný zdroj tepelného vyzařování

### Vlastnosti

- Tvar reflektoru umožňující koncentraci tepla na požadované místo.
- PAR38 má vnitřní reflektor opatřený 100% hliníkovou vrstvou, což znamená, že 100 % tepelných vln je vyzařeno předním otvorem reflektoru.
- PAR38 má menší, kruhové vlákno přispívající k vyšší koncentraci teploty v paprscích.
- Dobré vyvážení mezi životností a tepelným výstupem
- Červeně zbarvené baňky potlačují vyzařování viditelného světla a snižují oslnění

## Infračervené lampy pro lidské použití


### Aplikace

- Poskytuje úlevu od svalových bolestí a nemocí, jako je revmatismus, bolest v kříži, neuralgie, nachlazení, apod.
- Podporuje zotavení ze zranění
- Poskytuje vysoký komfort a kosmetickou péči

### Varování a bezpečnost


- Při správném použití je prasknutí lampy velmi nepravděpodobné. Pokud k tomu přesto dojde, opatrně její části odstraňte (s nasazenými rukavicemi nebo pomocí ochranných nástrojů, abyste se nepořezali). Vložte díly do uzavíratelného plastového sáčku a odнесите jej do místního sběrného dvora k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Dodržujte doporučenou dobu a vzdálenost expozice zařízení, se kterým je tato lampa používána. Delší/bližší než doporučené vystavení infračervenému teplu může způsobit popálení kůže nebo jiné nežádoucí reakce ochranných mechanismů pokožky.
- Dodržujte pokyny k zařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zraku a pokožky. Nemiřte lampou do očí, vždy chraňte oči, včetně toho, jak doporučuje výrobce zařízení.

### Versions

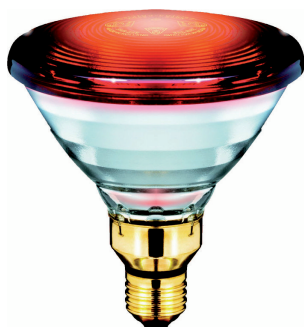

LPPR IRINPHI E27 PAR38

### Rozměrové výkresy

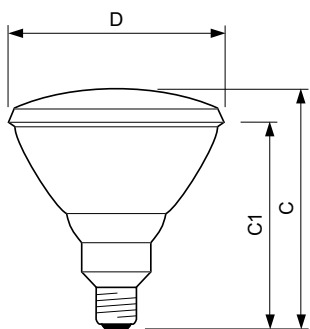

| Product                           | D      | C (max) | C1 (max) |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|
| PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12 | 121 mm | 136 mm  | 124 mm   |

## Infračervené lampy pro lidské použití

