



Een comfortabele warmtebron voor uw spieren

infrarode verwarmingsgloeilamp voor gezondheidszorg

Philips infraroodlampen voor gezondheidszorg en lichaamsverzorging zijn ontworpen voor het behandelen van diepliggende spieraandoeningen en sportblessures. Deze reflectorgloeilampen zijn een uitstekende oplossing voor het bieden van lokale warmtebehandeling ter verlichting van spierpijn. Ook kunnen ze gebruikt worden voor het behandelen van reumatische aandoeningen. Deze vorm van warmtetherapie heeft ook bewezen de genezing van verschillende soorten letsel te bespoedigen, zoals sportblessures en niet ontstoken wonden, waarbij in veel gevallen een snelle en effectieve verlichting van de pijn optreedt. De voordelen van deze vorm van warmtetherapie zijn gebaseerd op een plaatselijke verbetering van de doorbloeding in de huid die wordt veroorzaakt door vaatverwijding. Dit resulteert in een hogere transportsnelheid van metaboliëten en andere essentiële biochemische samenstellingen. De voordelen worden ook verkregen door het dieper binnendringen van de warmte, wat zorgt voor een zacht, aangenaam verwarmingseffect.

Voordelen

- Optimale binnendringing in huid en spieren voor ultieme verlichting van spierpijn
- 90% van de energie wordt uitgestraald als infrarode warmte
- Onmiddellijke, nauwkeurig regelbare bron van stralingswarmte

infrarode verwarmingsgloeilamp voor gezondheidszorg

Kenmerken

- Reflectorvorm maakt het mogelijk geconcentreerde warmte toe te passen waar hij nodig is.
- PAR38 heeft een 100% met aluminium gecoate interne reflector, wat betekent dat 100% van de warmte via de voorzijde uittreedt.
- PAR38 heeft een kleine, ronde gloeispiraal, wat ook bijdraagt aan een meer geconcentreerde warmte in de bundel.
- Goede balans tussen levensduur en warmteopbrengst
- Rood gekleurde lampen om uitstraling van zichtbaar licht en verblinding te beperken


Toepassing

- Leveren van verlichting voor spierpijn en aandoeningen zoals reumatiek, spit, zenuwpijn en verkoudheid.
- Bevorderen van herstel na letsel
- Bieden van comfort en cosmetische zorg

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een lamp kapot zal gaan als deze op de juiste manier wordt gebruikt. Mocht een lamp toch breken, ruim de onderdelen dan voorzichtig op (bij voorkeur met handschoenen of andere bescherming om snijwonden te voorkomen). Doe de onderdelen in een afsluitbare plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Volg de aanbevolen tijd en afstand op voor de hoeveelheid blootstelling aan het apparaat waarmee deze lamp wordt gebruikt. Als je je daar niet aan houdt, kan de infraroodstraling brandwonden of andere reacties van de huid veroorzaken.
- Volg de apparaatinstructies op voor de veiligheid en bescherming van je ogen en huid. Richt de lamp niet direct op je ogen, maar bescherm je ogen altijd. Dit zal ook door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen.


Versions

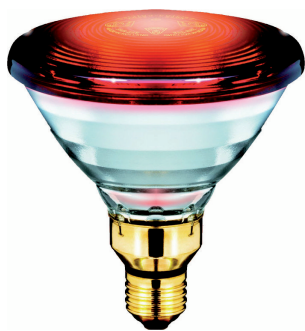

LPPR IRINPHI E27 PAR38

infrarode verwarmingsgloeilamp voor gezondheidszorg

Maatschets

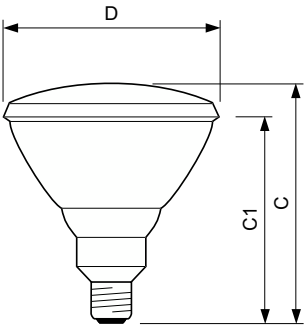

Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

