



O sursă de căldură confortabilă pentru musculatura dumneavoastră

Lămpi cu infraroșu pentru uz uman

Signify oferă două tipuri de lămpi cu infraroșu pentru utilizarea în dispozitive care radiază căldură pentru aplicații umane. Aceste lămpi cu infraroșu de la Philips au un spectru de lungimi de undă cu un vârf pronunțat la aproximativ 1000 nm în plaja IR-A cu penetrare în profunzime. Plaja IR-A are o putere de penetrare mai mare, ceea ce înseamnă că se disipează căldura pe o suprafață mai mare a pielii, generându-se astfel o căldură mai plăcută și mai difuză. Lămpile cu infraroșu de la Philips pentru aplicații umane sunt concepute pentru a susține relaxarea tensiunii musculare. Aceste lămpi pot fi folosite pentru a oferi căldură pielii, mușchilor și articulațiilor umane.

Beneficii

- Penetrare optimă a pielii și musculaturii pentru calmarea la maximum a durerii musculare
- 90 % din energie transmisă sub formă de căldură infraroșie
- Sursă de căldură radiantă instantanee, controlabilă cu precizie

Lămpi cu infraroșu pentru uz uman

Caracteristici

- Proiectate exclusiv pentru aplicații umane;
- Design optimizat al lămpilor pentru a direcționa energia termică către partea din față
- Lămpi puternice cu reglare a intensității (prin intermediul dispozitivului) pentru a satisface cerințele utilizatorului
- Echilibru bun între durata de viață a lămpii și căldura generată
- Filtre de culoare roșie pentru a reduce undele de lumină vizibilă și efectul de orbire


Cerere

- Dispozitive de încălzire cu infraroșu pentru uz casnic și profesional

Warnings and safety


- Spargerea lămpii este foarte puțin probabilă atunci când este utilizată corect. Dacă o lampă se sparge, îndepărtați cu grijă cioburile (cu mănuși sau instrumente de protecție pentru a evita tăieturile la nivelul pielii). Introduceți cioburile într-o pungă de plastic sigilabilă și duceți-o la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.
- Respectați timpul și distanța recomandate de expunere a dispozitivului cu care este utilizată această lampă. Expunerea pe o durată mai lungă sau la o distanță mai apropiată decât cea recomandată la căldură infraroșie poate cauza arsuri ale pielii sau alte reacții nedorite la nivelul pielii.
- Urmați instrucțiunile dispozitivului pentru siguranța și protecția ochilor și a pielii. Nu îndreptați lampa spre ochi, protejați întotdeauna ochii, inclusiv conform recomandărilor producătorului dispozitivului.

Versions

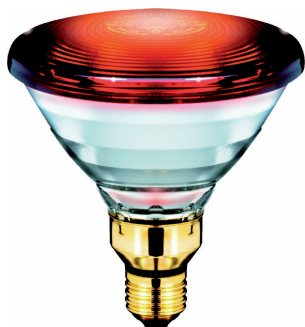

LPPR IRINPHI E27 PAR38

Cote

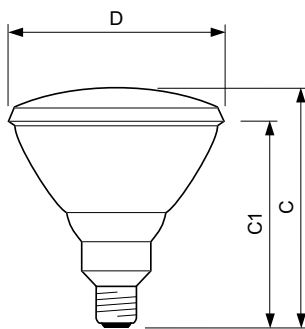

Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

Lămpi cu infraroșu pentru uz uman

