



Комфортне джерело тепла для ваших м'язів

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

Signify пропонує два типи інфрачервоних ламп для використання в тепловипромінювальних пристроях для використання людьми. Ці інфрачервоні лампи Philips мають спектр довжини хвилі з яскраво вираженим піком приблизно на 1000 нм у діапазоні ІЧ-А із глибоким проникненням. Діапазон ІЧ-А має більшу проникаючу здатність, що означає, що тепло розсіюється у більшому об'ємі шкіри, створюючи більш приємне та розсіяне тепло. Інфрачервоні лампи Philips призначені для полегшення напруги в м'язах. Ці лампи можна використовувати для забезпечення теплом шкіри, м'язів і суглобів людини.

Переваги

- Оптимальне проникнення тепла в шкіру та м'язи для лагідного, приємного ефекту комфорту
- 90 % енергії передається як інфрачервоне тепло
- Миттєве та точно кероване джерело випромінювання тепла

Характеристики

- Розроблено виключно для використання людьми
- Оптимізована конструкція ламп для спрямування теплової енергії вперед
- Потужні лампи, які можна регулювати (за допомогою пристрою) відповідно до вимог користувача
- Хороший баланс між терміном служби лампи та тепловіддачею
- Фільтри червоного кольору зменшують хвилі видимого світла та відблиски

Застосування


- Інфрачервоні обігрівачі для домашнього та професійного використання

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

Попередження та безпека


- При правильному використанні розбиття лампи дуже малоймовірне. Якщо лампа розбилася, обережно приберіть уламки (у рукавичках або захисних інструментах, щоб уникнути порізів шкіри). Покладіть деталі в поліетиленовий пакет, що закривається, і віднесіть його на місцеві пункти переробки сміття. Не використовуйте пилосос.
- Дотримуйтеся рекомендованого часу та відстані до пристрою, з яким використовується ця лампа. Триваліший/ближчий, ніж рекомендовано, вплив інфрачервоного тепла може спричинити опік шкіри або інші небажані реакції захисту шкіри.
- Дотримуйтеся інструкцій щодо пристрою для безпеки та захисту очей і шкіри. Не направляйте лампу в очі, завжди захищайте очі, у тому числі відповідно до рекомендацій виробника приладу.

Версії

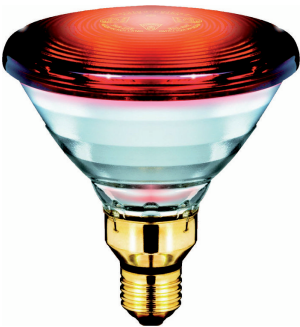

LPPR IRINPHI E27 PAR38

Розміри

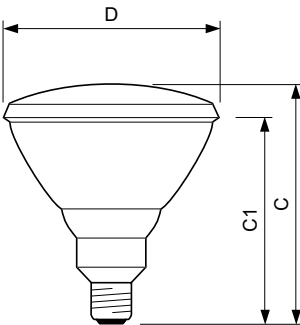

Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

