

**PHILIPS**

**Lighting**



# **UVB Narrowband PL-L/PL-S – most effective phototherapy lamp plus design freedom**

## **UV-B Narrowband PL-L/PL-S**

More than 400 independent clinical studies have proven that the UVB Narrowband PL-L/PL-S lamps are safer and more effective than any other lamps in their class. The PL-L/PL-S versions provide additional design freedom for system manufacturers since these are space-saving compact, single-ended lamps. Further flexibility is assured since they use the same lamp caps as general lighting lamps, they also use the same universal ballasts. Their best-in-class treatment effectiveness is a result of their very narrow waveband emission: between 305 and 315 nm with a peak at 311 nm. This is the most efficacious waveband for the treatment of psoriasis, and is therefore much more focused. As a result, exposure times are much shorter and this in turn leads to a reduction of side effects such as reddening of the skin and itching. All of this makes them ideal for phototherapy treatment of diseases such as psoriasis and vitiligo. What's more, because the overall dosage of this narrowband radiation can be closely controlled, these lamps are suitable for home therapy.

### **Avantages**

- Minimum side effects like redness, itching and burns
- Shorter period of exposure and less erythema radiation than conventional UVB lamps
- Optimal therapeutic effect with minimum side effects
- Proven to be most effective on the skin

# UV-B Narrowband PL-L/PL-S

## Fonctions

- Emission peak at 311 nm
- Narrowband
- Special developed phosphor and glass
- World wide tested in more than 400 clinical tests

## Application

- Psoriasis, Vitiligo

## Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

## Versions



XPPR XUVBPLS 0001

## Schéma dimensionnel

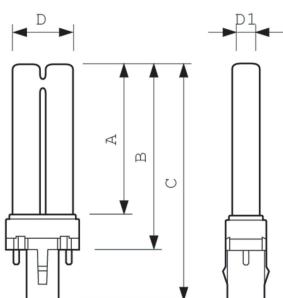

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144.5 mm	167 mm

## UV-B Narrowband PL-L/PL-S



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2023, août 2 - Les données sont sujettes à changement